



# 如何使用吩坦尼試紙 檢測您的藥物

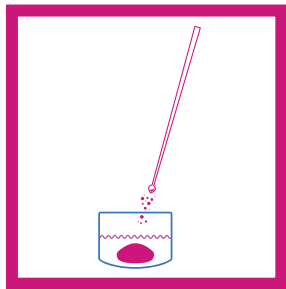

1. 請將您要檢測的藥物置於未使用過的小型容器中。

檢測的藥物越多，檢測結果越可靠。

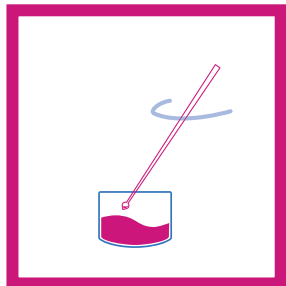

2. 在藥物中加水並將兩者混合。

每 10 毫克 (mg) 的：

- 冰毒、MDMA 和搖頭丸，使用一茶匙水。
- 其他藥物，如海洛因、古柯鹼、快克、氯胺酮和非醫療來源的藥丸，使用半茶匙水。

10 毫克的藥物足以覆蓋一美分硬幣上 Abraham Lincoln 的頭髮，或者填滿一個標準的微型勺。


一茶匙的量約等於一個蘇打水或飲用水瓶瓶蓋的容量。



或




或

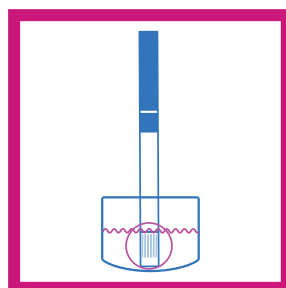

3. 將試紙在水中放 15 秒。



4. 將試紙平放，並等待兩分鐘。

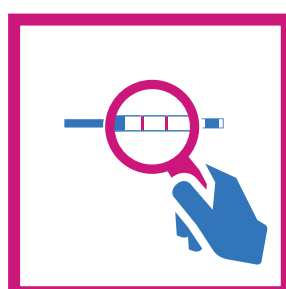

5. 讀取結果。

**陽性檢測結果：**如果您不打算使用吩坦尼，則請避免使用這類藥物，或者從低劑量開始，緩緩用來。



**陰性檢測結果：**請記住，沒有任何檢測的準確率是 100%，您的藥物可能仍然含有吩坦尼。



**無效檢測結果：**重新檢測您的藥物。



即使您的藥物不含吩坦尼，也仍然存在過量使用的風險。應採取措施降低風險，例如避免混合使用藥物、避免獨自使用藥物，並且隨身攜帶納洛酮。



如需更多資訊，請掃描 QR 碼或造訪  
[nyc.gov/health/fentanyl](https://nyc.gov/health/fentanyl)。